

คู่มือการใช้งาน
ชุดจำลองสถานการณ์การเป็นผู้สูงอายุ
The Aged Simulator Set
(LM-060)

ส่วนประกอบต่างๆ




ส่วนประกอบ	จำนวนชิ้น
1. ส่วนประคองหลัง	1 ชิ้น
2. ปอดอกสวมเข้า	1 คู่
3. ปอดอกสวมข้อศอก	1 คู่
4. ที่สวมนิ้ว	1 คู่
5. ไม้เท้า	1 ชิ้น
6. ถุงมือ	10 คู่
7. แว่น	1 ชิ้น
8. ที่สวมคอ	1 ชิ้น
9. ที่อุดหู	50 คู่
10. ที่ถ่วงน้ำหนักข้อมือ (500 กรัม)	1 คู่
11. ที่ถ่วงน้ำหนักข้อเท้า (1000 กรัม)	1 คู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชุดจำลองรหัส LM-102 จะเป็นชุดขนาด L size โดยส่วนขอบของส่วนประกอบจะเป็นสีเหลือง
2. ชุดจำลองรหัส LM-060 จะเป็นชุดขนาดเล็กโดยส่วนขอบของส่วนประกอบจะเป็นสีเขียว
3. ส่วนประกอบของชุดจำลองประกอบด้วย ไม้เฝ้า ถูมือ แวน ที่อุดหู ที่ถ่วงน้ำหนัก กระเป๋าคู่มือการใช้งาน จะเหมือนกันทั้งสองรุ่น

รายละเอียดสำคัญของส่วนประกอบ ปลอกสวมเข้าและข้อศอก

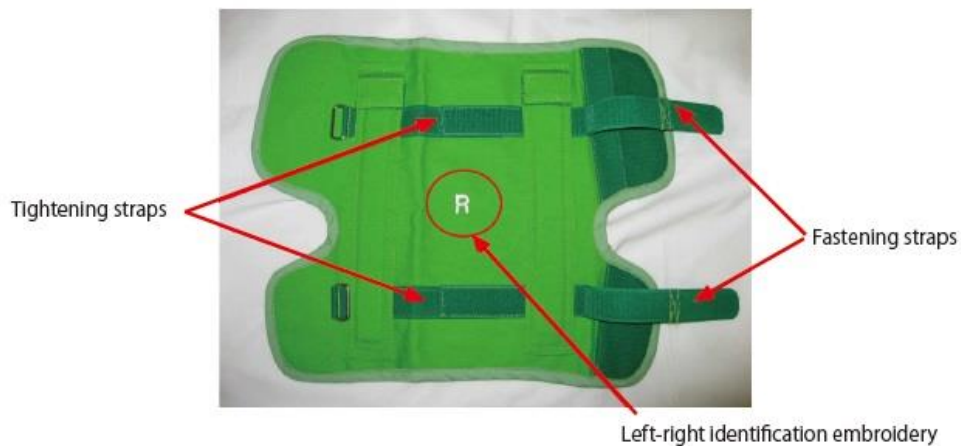


1. ตัว R สัญลักษณ์สำหรับสวมฝั่งขวา และตัว L สำหรับสวมฝั่งซ้าย
2. มีสายยึดให้แน่น เมื่อสวมใส่แล้ว

การสวมปลอกข้อศอก

1. นำปลอกข้อศอกมาพันส่วนแขนดังรูป โดยให้ส่วนข้อศอกโผล่ออกทางช่อง แล้วจึงนำส่วนปลายของสายรัดไปสอดเข้ากับห่วงเหล็กอีกด้านหนึ่ง (ทำทั้งสองเส้น)




2. เมื่อสายรัดสอดเข้ากับห่วงเหล็กแล้ว ให้ดึงให้กระชับ แล้วจึงประกบแนบกับส่วน Velcro

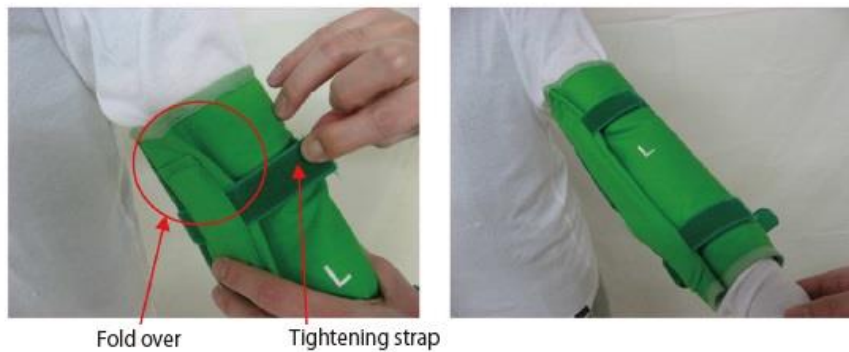

การสวมปลอกข้อเข่า

1. นำปลอกข้อเข่ามาพันส่วนขาตั้งรูป โดยให้ส่วนหัวเข่าโผล่ออกทางช่อง แล้วจึงนำส่วนปลายของสายรัดไปสอดเข้ากับห่วงเหล็กอีกด้านหนึ่ง (ทำทั้งสองเส้น)

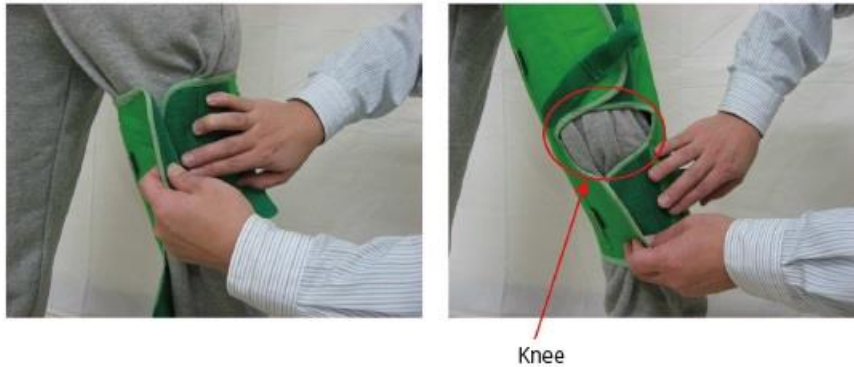

2. เมื่อสายรัดสอดเข้ากับห่วงเหล็กแล้ว ให้ดึงให้กระชับ แล้วจึงประกบแนบกับส่วน Velcro



การสวมส่วนประคองหลัง



2 places

1. โน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย แล้วแขวนส่วนประคองหลังกับหัวไหล่จากด้านหลัง ดังรูป นำสายรัดทั้งสองข้างมายึดเข้าด้วยกันด้วยแถบ Velcro ทั้งตำแหน่งหน้าอกและหน้าท้อง

การใช้ที่สวมนิ้ว

1. สวมถุงมือ



2. นำที่สวมนิ้วสวมทับถุงมือ ดังรูป



การติดตั้งชิ้นส่วนอื่นๆ

1. ชิ้นส่วนที่ถ่วงน้ำหนัก สามารถนำมาติดตั้งโดยการรัดที่ตำแหน่งข้อมือ และ ข้อเท้า ดังรูป
หมายเหตุ ชิ้นส่วนสำหรับข้อมือและข้อเท้ามีรูปแบบเฉพาะส่วน ไม่สามารถนำมาสลับตำแหน่งกัน
หรือการใช้งานกันได้



2. สวมแว่นตา (การสวมแว่นตาจะทำให้เกิดข้อจำกัดในการมองเห็น ดังนั้นควรมีผู้ดูแลเพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้)



3. การใส่ที่อุดหู ระวังอย่าใส่ลึกเกินไปเพราะจะทำให้หน้าออกลำบาก และไม่ควรสลับกันใช้กับบุคคล
อื่น



4. ใช้ไม้เท้าช่วยในการเดิน



ข้อควรระวัง

1. อย่านำชุดจำลองไปซัก รีด หรือใช้น้ำยาใดๆ เด็ดขาด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด หรือซักแห้งเท่านั้น
2. ชิ้นส่วนสำหรับถ่วงน้ำหนักก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้เช่นกัน
3. ก่อนการซักแห้งให้ถอดสายซิปและแผ่นอลูมิเนียมจากชิ้นส่วนประกอบหลังออกก่อนทุกครั้ง

